

MASAJEADOR MUSCULAR ANATOMICO



Masajeador Muscular Anatómico

El *masajeador muscular anatómico* fue desarrollado bajo la teoría de los canales y colaterales de la medicina tradicional china, con el fin de darle efectos saludables al cuerpo.

La teoría de los canales y colaterales, la acupuntura son un invaluable tesoro en la cultura china, como así también una parte indispensable de la medicina tradicional china como lo son las hierbas tradicionales, la digitopuntura y el Qigong (terapia que utiliza ejercicios de respiración para propiciar la circulación de energía vital). Esta práctica se ha utilizado en el tratamiento clínico por más de 5000 años.

Masajeador Muscular Anatomico

Mucho antes del desarrollo de la medicina occidental, nuestros ancestros ya habían comenzado a utilizar agujas de plata; adhesivos y rollos de moxa para aplicar en ciertos puntos específicos con el objeto de tratar distintas enfermedades del cuerpo humano y aliviar dolencias. Desde ese momento, se estableció la teoría de los canales y colaterales en la medicina tradicional china, que hizo una gran contribución al cuidado de la salud del ser humano. Así también, la acupuntura se ha utilizado ampliamente en numerosas partes del mundo, y bien recibidas en innumerables instituciones médicas y público en general de varios países.

El *masajeador muscular anatómico* representa un gran avance para la aplicación de las terapia de canales, colaterales, puntos y otros aspectos de la terapia tradicional, al emplear una combinación de la medicina china moderna y ancestral con la medicina occidental después de denodados esfuerzos.

Masajeador Muscular Anatomico

El perfeccionamiento exitoso de este *masajeador muscular* ha agregado una nueva forma de empleo de la acupuntura. Este instrumento no solamente abarca la terapéutica acupuntural tradicional, sino que representa un modo de empleo más conveniente, con una más fácil utilización, **sin necesitar introducir agujas ya que todos sus usos ocurren fuera del cuerpo humano.** Esto brinda energía física sin utilización de electricidad, con un mayor campo de acción y libre de cualquier tipo de marcas. El *masajeador muscular anatómico* es la ideal integración de la ciencia moderna con la medicina tradicional china.

Masajeador Muscular Anatómico




El *masajeador muscular anatómico* fue desarrollado bajo la teoría de los canales y colaterales de la medicina tradicional china, con el fin de darle efectos saludables al cuerpo.

La teoría de los canales y colaterales, la acupuntura son un invaluable tesoro en la cultura china, como así también una parte indispensable de la medicina tradicional china como lo son las hierbas tradicionales, la digitopuntura y el Qigong (terapia que utiliza ejercicios de respiración para propiciar la circulación de energía vital). Esta práctica se ha utilizado en el tratamiento clínico por más de 5000 años.


CARACTERISTICAS

•El *masajeador muscular* está diseñado con características únicas y novedosas. La totalidad del equipo depende enteramente de la fuerza mecánica generada cuando el usuario ejerce presión en el punto hasta producir un impulso de energía instantáneo que llega al punto del canal y lo estimula abriendo así los canales y colaterales, vigorizando la energía vital y promoviendo la circulación sanguínea de una manera segura, económica y estable.

•El cabezal puede ajustarse a cualquier ángulo en una escala de 90° de acuerdo con los requerimientos del uso en las distintas partes del cuerpo, permitiendo la aplicación en distintas partes del cuerpo. Ésta se complementa con el cabezal de jade, con el que se puede realizar masaje con magnetos y jade de efecto embellecedor. Ambos cabezales pueden montarse y desmontarse fácilmente, simplificando la aplicación.

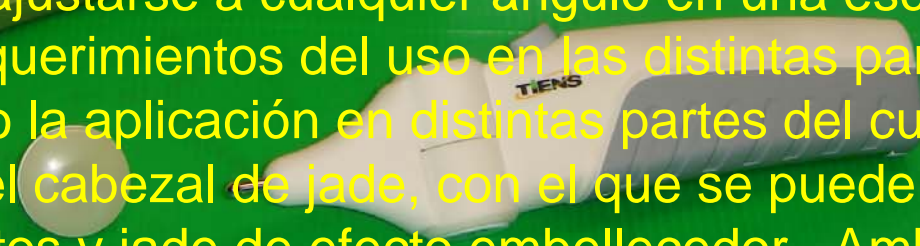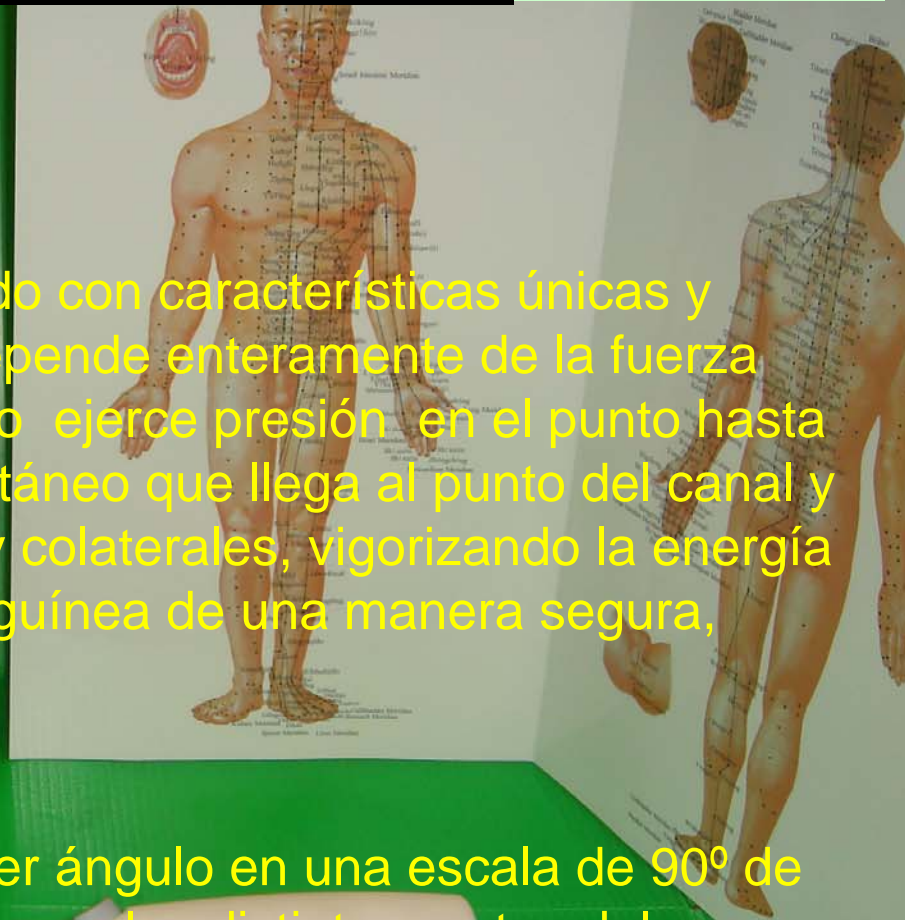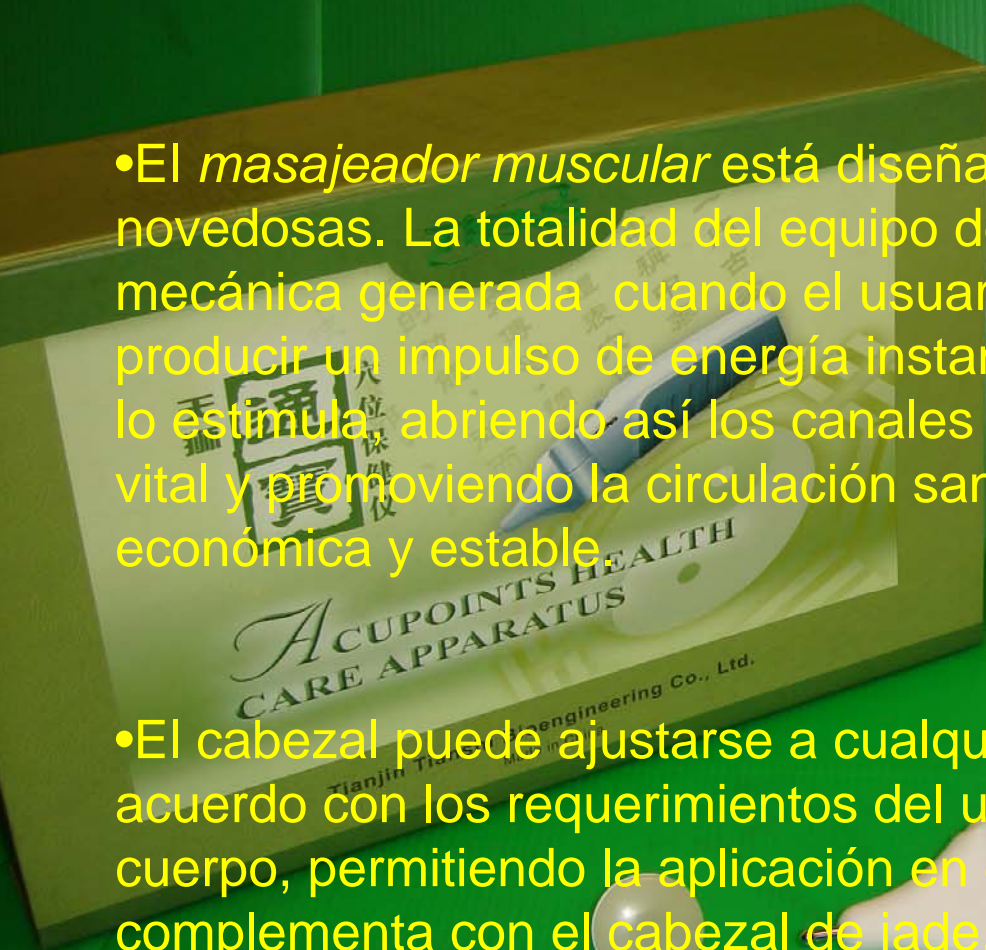

FUNCIONAMIENTO

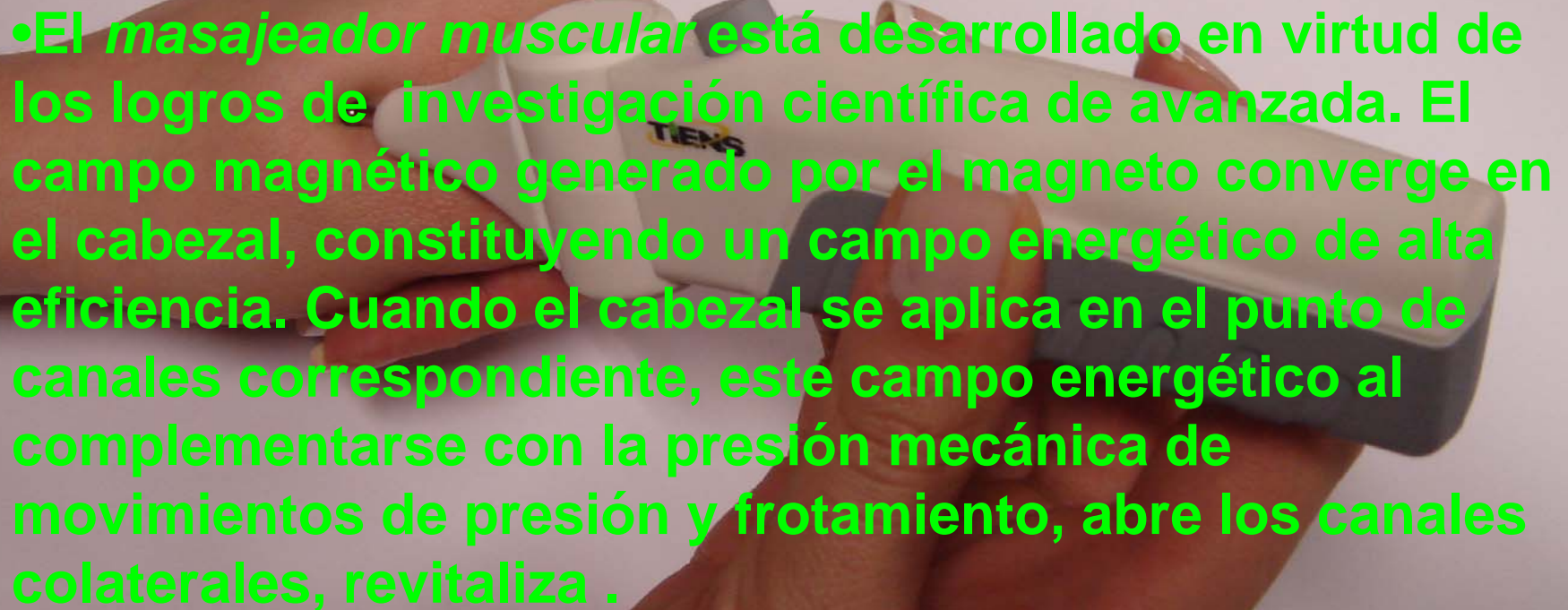

•El *masajeador muscular* está desarrollado en virtud de los logros de investigación científica de avanzada. El campo magnético generado por el magneto converge en el cabezal, constituyendo un campo energético de alta eficiencia. Cuando el cabezal se aplica en el punto de canales correspondiente, este campo energético al complementarse con la presión mecánica de movimientos de presión y frotamiento, abre los canales colaterales, revitaliza .

•El *masajeador muscular anatómico* puede desbloquear de canales, producido por distintas enfermedades.

MODO DE USO

- **Seleccione el punto de acuerdo a la teoría de canales y colaterales o el punto donde se desencadena el dolor.**
- **Tome el aparato con la mano y coloque el cabezal sobre el punto seleccionado, ejerza presión y frote de 1 a 3 minutos.**
- **Terapia de presión en puntos: la intensidad de la presión tiene que ser regulada según la intensidad que el paciente acepte. En caso de que aparezcan las 8 Sensaciones (picazón, hormigueo, frío, plenitud, pesadez, adormecimiento, dolor y calor) indica que ocurre el fenómeno de Llegada de la Energía Vital. Preste atención en no dañar a la piel. Se recomiendan 3 a 5 segundos de aplicación de presión, para después ejecutar el frotamiento.**

MODO DE USO

- **Terapia de frotamiento:** coloque el cabezal en el punto, presione de acuerdo a lo que el paciente acepte. Frote en forma circular en el sentido de las agujas del reloj y contrarreloj. En caso que se presenten las 8 Sensaciones, indica que ocurre el fenómeno de Llegada de la Energía Vital. Cada frotamiento debe rondar de 5 a 10 segundos. Después de este movimiento, se puede hacer terapia de presión en los puntos y luego alternar entre presión y frotamiento por 1 a 3 minutos. Luego se puede aplicar el disparo estático.
- **Terapia de disparos:** Después de presionar y frotar los puntos de 1 a 3 minutos, presione el gatillo. Aplicar de 2 a 4 disparos en cada canal. El cabezal debe rozar ligeramente la piel sobre el canal. Cuando se produce la descarga, el dolor y la transmisión sobre la piel deben ocurrir al mismo tiempo.
- **Utilice el cabezal para realizar masaje a lo largo de canales y colaterales.**
- **Seleccione de 1 a 4 canales por sesión, de 1 a 3 veces por día. Se pueden utilizar simultáneamente dos *masajeadores musculares Tiens* para realizar terapia en ambas partes de un canal, aplicando masaje con las dos manos.**

Masajeador Muscular Anatomico

APLICACION


Se recomienda para aliviar la stasis en canales y colaterales provocada por la fatiga u otras enfermedades.

天獅
通寶
穴位保健儀

ACUPOINTS HEALTH
THERAPY APPARATUS
Tianjin Tianshi Bioengineering Co., Ltd.
Made in China

RECOMENDACIONES

- Lea el manual de instrucciones antes del uso del aparato para conocer el método de uso y selección de canales y meridianos.

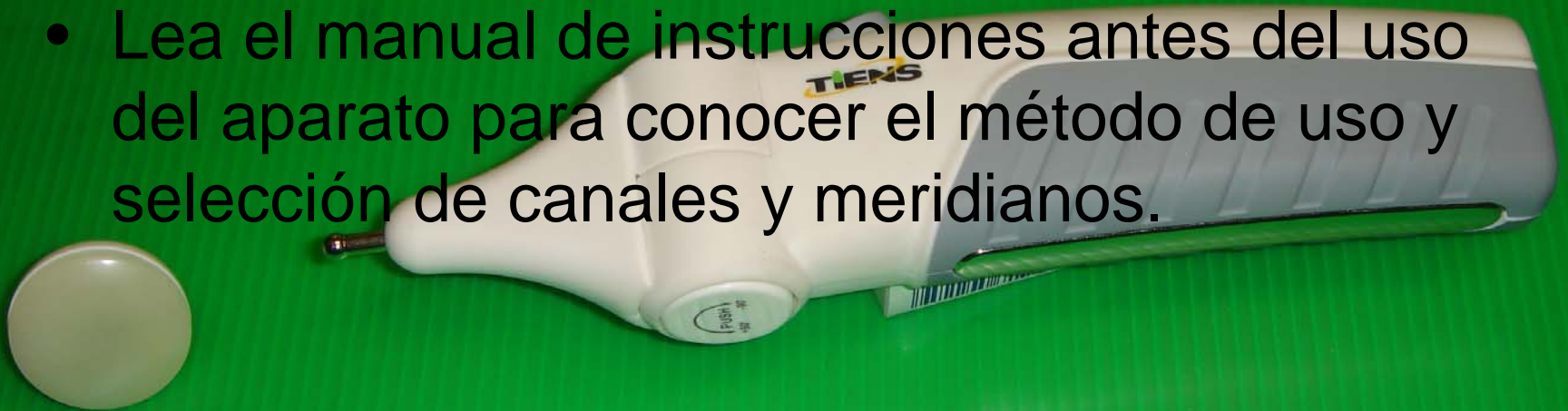

- No alterar el uso del producto para que no dificulte su funcionamiento.

ADVERTENCIAS



Se prohíbe el uso del producto a mujeres embarazadas y pacientes que utilicen marcapasos o bomba de insulina.

MANTENIMIENTO

1. Utilice un paño suave seco o semi seco para su limpieza. No se permite el uso de solventes o agua.

2. Evitar golpes, agua, humedad y contacto con altas temperaturas.

